

PACOTE DE SOLUÇÕES Na⁺/K⁺ EASYLYTE

REF 2109 400ml

REF 2120 800ml

INDICAÇÃO DE USO

O pacote de soluções Na⁺/K⁺ EasyLyte foi feito para a determinação quantitativa de sódio (Na⁺) e potássio (K⁺) em soro, plasma, sangue total e urina humanos usando o analisador EasyLyte® da MEDICA.

Somente para uso profissional. Para uso somente em diagnósticos *in vitro*.

RESUMO E EXPLICAÇÃO

As medições de eletrólitos nos fluidos biológicos eram tradicionalmente realizadas usando a fotometria de chama. O desenvolvimento de compostos orgânicos seletivos para o sódio, potássio e outros eletrólitos permitiu o desenvolvimento de sensores capazes de detectar a medição de fluidos biológicos em todo o intervalo fisiológico. Esses dispositivos são conhecidos como sensores íon-seletivos.

O sódio é o principal cátion no fluido extracelular e tem um importante efeito na pressão osmótica e na distribuição de água entre as células, o plasma e o fluido intersticial. O desequilíbrio do sódio baixo (hiponatremia) é associado a diarreia, poliúria grave, acidose metabólica, doença de Addison e doença tubular renal. O desequilíbrio de sódio alto (hipernatremia) é associado a hiperadrenalismo, desidratação grave, lesão cerebral, coma diabético e excesso de tratamento com sais de sódio.

O potássio é um dos principais cátions no líquido intracelular. O desequilíbrio de potássio causa um efeito direto na irritabilidade dos músculos, função miocárdica e respiração. Algumas condições que afetam os níveis de potássio no sangue incluem hipoaldosteronismo, diarreia, vômito e tratamento com diuréticos para a hipertensão ou doença cardíaca. Diferentemente do sódio, não existe um mecanismo para manter um nível limiar de potássio no corpo.

PRINCÍPIO DO PROCEDIMENTO

O analisador EasyLyte mede o sódio e o potássio em soro, plasma, sangue total e urina humanos usando tecnologia de eletrodos seletivos de íons. O eletrodo de sódio de passagem de fluxo usa uma membrana seletiva, que é formulada especialmente para ser sensível aos íons de sódio. O eletrodo de potássio emprega um *design* semelhante, com materiais de membrana seletiva adequados. O potencial de cada eletrodo é medido em relação a uma tensão fixa e estável, que é estabelecida pelo eletrodo de referência de prata/cloreto de prata de junção dupla. Um eletrodo seletivo de íons desenvolve uma tensão que varia conforme a concentração do íon ao qual corresponde. A relação entre a tensão desenvolvida e a concentração do íon detectado é logarítmica, conforme expressa pela equação de Nernst.

$$E = E^{\circ} + \frac{RT}{nF} \log (g C)$$

onde: E = O potencial do eletrodo na solução de amostra
E° = O potencial desenvolvido em condições padrão
RT/nF = Uma “constante” dependente da temperatura, chamada de declive(s)
n = 1 para sódio, potássio
Log = Função do logaritmo de base dez
g = Coeficiente de atividade do íon medido na solução
C = Concentração do íon medido na solução

REAGENTES

Pacote de soluções 400ml (REF 2109)

Solução A padrão, 400ml

140,0 mmol/L Na⁺

4,0 mmol/L K⁺

Tampão

Conservante

Agente de umedecimento

Solução B padrão, 130ml

35,0 mmol/L Na⁺

16,0 mmol/L K⁺

Tampão

Conservante

Agente de umedecimento

Solução de lavagem, 50 ml

0,1 mol/L Difluoreto de amônio

Recipiente de resíduos

Pacote de soluções de 800 ml (REF 2120)

Solução A padrão, 800ml

140,0 mmol/L Na⁺

4,0 mmol/L K⁺

Tampão

Conservante

Agente de umedecimento

Solução B padrão, 180ml

35,0 mmol/L Na⁺

16,0 mmol/L K⁺

Tampão

Conservante

Agente de umedecimento

Solução de lavagem, 80 ml

0,1 mol/L Difluoreto de amônio

Recipiente de resíduos

DECLARAÇÕES DE PRECAUÇÃO



Pode causar irritação da pele (H315)

Pode causar irritação dos olhos (H319)

Se estiver na pele, lave com água em abundância e sabão (P302 + P352)

Se estiver nos olhos, enxágue cuidadosamente com água durante vários minutos. Retire lentes de contato, caso estejam presentes e isso seja fácil de fazer, e continue a enxaguar. (P305 + P351 + P338)



Quando usado, o pacote de soluções contém fluidos corporais humanos e é considerado risco biológico. Manuseie e descarte o pacote de soluções usando as mesmas precauções de qualquer material de risco biológico. Descarte segundo as normas locais.

INSTRUÇÕES DE MANUSEIO, ARMAZENAGEM E ESTABILIDADE DO PACOTE DE SOLUÇÕES


O pacote de soluções é fornecido pronto para uso. O pacote de soluções lacrado é estável até a data de validade indicada no rótulo se armazenado a 4–25 °C. Após a instalação, o pacote de soluções fica estável a bordo do analisador EasyLyte até a data de validade indicada no rótulo. NÃO CONGELE.

RETIRADA DO PACOTE DE SOLUÇÕES USADO

Seguindo precauções laboratoriais padrão, segure firmemente o pacote de soluções e puxe-o para longe do analisador. NÃO APERTE O PACOTE DE SOLUÇÕES. Coloque a tampa vermelha sobre os quatro conectores e descarte de acordo com as regulamentações locais.


INSTALAÇÃO DE UM NOVO PACOTE DE SOLUÇÕES

Retire o novo pacote de soluções da respectiva embalagem de envio. Retire o rótulo laranja, grave a data na guia destacável e afixe-a na frente do pacote de soluções. Isso indica a data de instalação do pacote de soluções. Remova a tampa vermelha. Instale o novo pacote de soluções até este ficar firmemente encaixado na válvula das soluções.

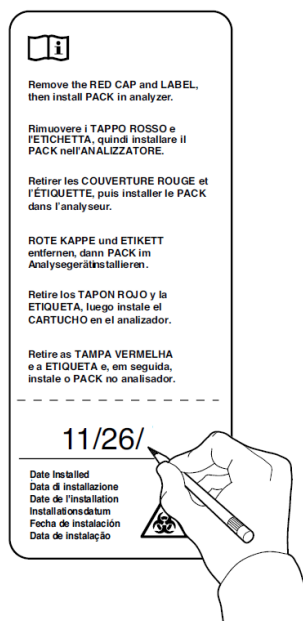

INSTRUÇÕES PARA ZERAR O CONTADOR

O analisador EasyLyte tem um contador interno que monitora a utilização do pacote de soluções. O contador da % tem de ser colocado em zero (0) sempre que um novo pacote de soluções for instalado. Ao instalar um novo pacote de soluções, entre no **MENU SECUNDARIO** e selecione a opção ***UTILIZ PACK? ***. Ao responder SIM para ***UTILIZ PACK? ***, o analisador EasyLyte exibe e imprime o percentual do pacote de soluções. Pressione SIM novamente, e o *software* do analisador EasyLyte reconhecerá e selecionará automaticamente o tamanho do pacote (400ml ou 800ml). Responda SIM para **REDEFINIR A 0%** para o pacote de soluções que estiver instalando. Em seguida, o analisador EasyLyte entrará automaticamente no modo *****EM ESPERA*****. Quando o analisador EasyLyte é recalibrado, ele automaticamente purga as linhas de fluido do novo pacote de soluções para assegurar uma calibração de sucesso.

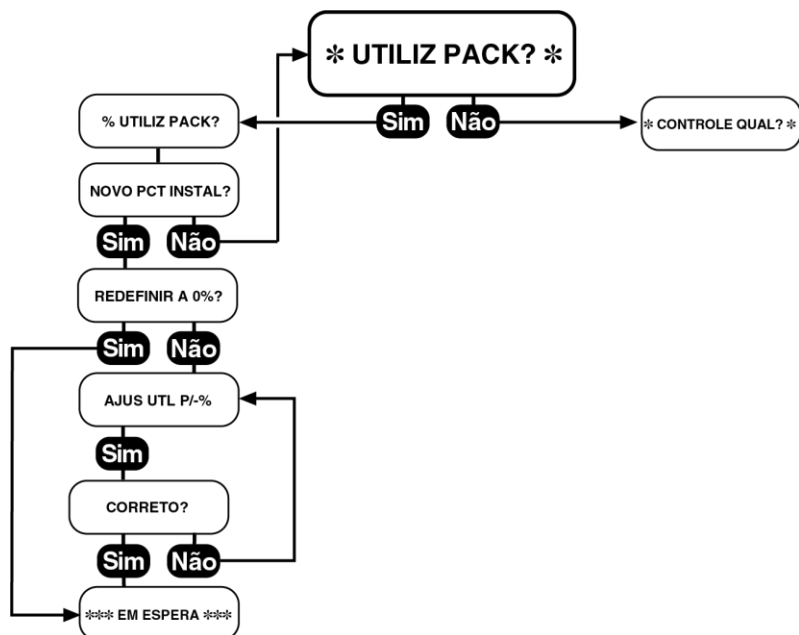

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Consulte o Manual do Operador EasyLyte para obter informações detalhadas e dados de desempenho.