

REF 10659 6 X 1 mL'lik ŞİŞELER

C-REAKTİF PROTEİN (CRP) KALİBRATÖR KİTİ

Her biri insan kaynaklı materyallere dayalı olarak farklı CRP düzeylerinde 1 mL sıvı stabil kalibratör içeren şişeler. Bu çoklu kalibratör seti, Medica Corporation için üretilmiştir.

KULLANIM AMACI

CRP Kalibratör Kiti, EasyRA CRP reaktifiyle birlikte kullanıldığında EasyRA® Clinical Chemistry Analyzer'da Medica CRP miktar tayini kalibrasyonu için kullanılır. CRP kalibratörleri, insan serumu ve plazmasında CRP ölçümünde değerlerin tayininde kullanılan referans noktalarını belirlemek için kullanılabilir. *In vitro* teşhis amaçlı kullanım içindir. Yalnızca profesyonel kullanım içindir.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ VE UYARILAR

Bu ürünün elde edildiği insan kaynaklı materyali test edilmiştir ve HBsAg, anti-HIV 1 / 2, anti-HCV ve HIV-1 Ag ile reaksiyon vermediği tespit edilmiştir.

Ancak, hiçbir yöntem enfeksiyon ajanlarının yokluğunu tam olarak garanti edemediği için, bu materyal ve tüm hasta örnekleri işlenmeli ve enfeksiyon hastalıklarını bulaştırmıyormuş gibi yok edilmelidir.

İŞLEME, SAKLAMA VE STABİLİTE TALİMATLARI

Kalibratörler, 2-8°C'de saklanması halinde etiket üzerindeki son kullanma tarihine kadar stabildir. Kalibratörler açıldıktan sonra, kalibratörü kapalı olarak 2 – 8°C'de saklayın. Açılmış kalibratörler 2 – 8°C'de 3 ay boyunca stabildir.

KULLANIM TALİMATLARI

1. Kalibratör şişesini açtıktan sonra, şişenin 20 dakika süreyle ortam sıcaklığına gelmesi için bekleyin.
2. Döndürerek veya ters çevirerek yavaşça karıştırın. **Çalkalamayın.**
3. C-reaktif protein Çoklu Kalibratörlerin miktar tayini, test prosedüründe çalıştırılan hasta test numunelerindeki prosedürün aynısıyla yapılır. Medica C-reaktif protein reaktif kullanma talimatlarına bakın.

DEĞER ATAMA

Değerler, uygun Uluslararası Referans Hazırlamaya (ERM-DA472) göre standartlaştırılmış malzemelere referansla, lateksle geliştirilmiş immünotürbidimetrik yöntem kullanılarak CRP Kalibratör Serilerine atanır.

Aşağıdaki tablo CRP Kalibratörü için atanmış değerleri içermektedir:
Lütfen, tam kalibratör değerleri için her lotun şişe etiketine bakın.

Lot No. 24048 Son Kullanma Tarihi: 2025-02-28

Analit:


Atanan Değer

EasyRA için Kalibratör Değerleri

	mg/L
EasyCal CRP Düzeyi 1	0,0
EasyCal CRP Düzeyi 2	2,5
EasyCal CRP Düzeyi 3	10,0
EasyCal CRP Düzeyi 4	20,0
EasyCal CRP Düzeyi 5	80,0
EasyCal CRP Düzeyi 6	160,0



Medica Corporation, 5 Oak Park Drive
Bedford, MA 01730-1413 USA

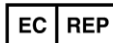

Emergo Europe, Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague, The Netherlands