

MEDICA EASYCAL 校准品



REF 10659 6 X 1mL 瓶装

C 反应蛋白 (CRP) 校准品

西林瓶装，每瓶含基于人源材料的不同水平 CRP 的液态稳定校准品 1mL。这种多点校准组件是为 Medica Corporation 生产的。

预期用途

该 CRP 校准品目的是用于与 EasyRA CRP 试剂配合使用，在 EasyRA® 临床化学分析仪上校准 Medica CRP 测定。CRP 校准品用于建立参考点，以在人血清和血浆的 CRP 测定中用于确定值。仅用于体外诊断用途。仅供专业人员使用。

安全措施和警告

对制备本品的人源材料，已进行逐一测试，确定没有 HBsAg、抗-HIV 1 / 2、抗-HCV 和 HIV-1 Ag 的反应。

但由于没有一种方法能完全保证不存在感染因子，处理本材料和所有患者样本时，应把他们视作能传播感染性疾病的材料和样本。

关于搬运、贮藏和稳定性的说明

未打开的校准品如于 2-8°C 下贮藏，在标签上列出的有效期限内是稳定的。
在校准品打开后，将校准品小瓶密封，于 2-8 °C 下贮藏。已打开的校准品在 2-8°C 下能稳定达 3 个月。

使用说明

1. 在打开校准品小瓶之前，让校准品回温至环境温度，持续 20 分钟。
2. 轻旋或倒置令其混匀。 **不要摇晃。**
3. 在试验过程中采用与患者试验样品相同的方式来处理 C 反应蛋白多点校准组件。参考 Medica C 反应蛋白试剂插页说明。

赋值

CRP 校准品系列的值采用胶乳增强免疫比浊法指定，并参考对照适当国际参考品 (ERM-DA472) 标准化的材料。

下表包含给 CRP 校准品所赋的值：
请参考每个批次的西林瓶标签以获得准确校准品值。

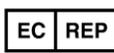
批号：24048 失效期：2025-02-28

分析物：

所赋值

EasyRA 校准品值	mg/L
EasyCal CRP 1 级	0.0
EasyCal CRP 2 级	2.5
EasyCal CRP 3 级	10.0
EasyCal CRP 4 级	20.0
EasyCal CRP 5 级	80.0
EasyCal CRP 6 级	160.0

 Medica Corporation, 5 Oak Park Drive
Bedford, MA 01730-1413 USA

 Emergo Europe, Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague, The Netherlands