

MEDICA EASYCAL

REF 10653

ФЛАКОНЫ 6 X 1,0 мл

КАЛИБРАТОР БИОХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ЛПВП

Ампулы, содержащие по 1,0 мл лиофилизированной человеческой сыворотки с липопротеинами различных классов, включая липопротеины высокой плотности.

Примечание: Значение холестерина ЛПВП взято из стандартного метода Центра Контроля Заболеваний (CDC) для ЛПВП.

НАЗНАЧЕНИЕ

Для использования в качестве калибратора при оценке уровня холестерина ЛПВП с помощью набора Medica HDL в биохимическом анализаторе Medica EasyRA.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

Исходный человеческий материал, из которого был получен данный продукт, был протестирован у каждого отдельного донора и оказался отрицательным по HBsAg, anti-HIV 1 / 2, anti-HCV и HIV-1 Ag.

Тем не менее, ни один из методов не может гарантировать полного отсутствия возбудителей инфекций, поэтому данный материал и все пробы от пациентов следует обрабатывать и утилизировать по правилам обращения с инфекционно опасным материалом.

ИНСТРУКЦИИ ПО ОБРАЩЕНИЮ, ХРАНЕНИЮ И СТАБИЛЬНОСТИ

При хранении при 2 - 8 °C сухой калибровочный стандарт стабилен до истечения срока годности, указанного на этикетке. После восстановления храните калибровочный стандарт в закрытом виде при температуре 2 – 8 °C. Восстановленный калибровочный стандарт стабилен в течение 14 дней при температуре 2 – 8 °C. Стабильность разведенного калибратора может быть продлена путем аликвотирования и замораживания разведенного калибратора при температуре менее -70 °C. Замороженные аликвоты при температуре -70 °C стабильны до 4 недель.

ИНСТРУКЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

1. Перед разведением согрейте ампулу при комнатной температуре.
2. Аккуратно разведите каждую ампулу лиофилизированной сыворотки ровно 1,0 мл воды для разведения реагента комнатной температуры.
3. Закройте ампулу и дайте ей настояться в течение 20 минут. Перемешайте легкими вращательными движениями или переворачиванием. **Не встряхивать.**

ПРИСВОЕНИЕ ЗНАЧЕНИЙ

В Таблице ниже содержатся присвоенные значения для калибратора ЛПВП:

Номер лота. 25006 Годен до: 2026-06-24


Анализируемое вещество:
Холестерин ЛВП

Присвоенное значение
59

Единицы
мг/дл



Medica Corporation, 5 Oak Park Drive
Bedford, MA 01730-1413 USA

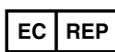

Emergo Europe, Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague, The Netherlands