

REF 10655

6 X FRASCOS DE 1,0 mL

CALIBRADOR PARA TESTE BIOQUÍMICO DE LDL

Cada ampola contém 1,0 mL de soro humano liofilizado contendo lipoproteínas de diversas classes, incluindo lipoproteínas de baixa densidade.

Obs.: O valor para colesterol LDL foi obtido a partir do Sistema Nacional de Referência para o Colesterol (NRS/CHOL) dos Estados Unidos.

INDICAÇÃO DE USO

Utilizado como calibrador de LDL para o teste de colesterol LDL do Analisador Químico Medica EasyRA.

PRECAUÇÕES E AVISOS DE SEGURANÇA

O material de origem humana do qual este produto foi derivado foi testado em caráter de doador único, e determinado como não-reagente para HBsAg, anti-HIV 1 / 2, anti-HCV e HIV-1 Ag.

Entretanto, como nenhum método pode oferecer certeza absoluta em relação à ausência de agentes infecciosos, este material e todas as amostras de pacientes devem ser manuseadas e descartadas como se pudessem potencialmente transmitir doenças infecciosas.

INSTRUÇÕES DE MANUSEIO, ARMAZENAGEM E ESTABILIDADE

O calibrador seco permanecerá estável até a data de validade informada no rótulo desde que armazenado a 2-8 °C. **NÃO USE APÓS A DATA DE VALIDADE.** Após a reconstituição, armazene o calibrador fechado a 2-8 °C. O calibrador reconstituído permanece estável por 14 dias a 2-8 °C. A estabilidade após reconstituição pode ser estendida por meio de alíquotagem e congelamento do calibrador reconstituído a temperaturas inferiores a -80 °C. As alíquotas de calibrador de LDL congeladas permanecem estáveis por até 4 semanas a -80 °C. **DESCARTE AS AMPOLAS EM CASO DE TURVAÇÃO OU EVIDÊNCIA DE CONTAMINAÇÃO POR MICROORGANISMOS.**

INSTRUÇÕES DE USO

1. Antes da reconstituição, permita que a ampola aqueça até a temperatura ambiente.
2. Reconstitua cuidadosamente cada uma das ampolas de soro liofilizado com exatamente 1,0 mL de água de grau reagente à temperatura ambiente.
3. Feche a ampola e deixe em repouso por 20 minutos. Misture delicadamente com movimentos circulares ou inversão. **Não agite.**
4. O calibrador deve ser processado antes das amostras do paciente, de acordo com as instruções do manual do operador do EasyRA e com as instruções de uso do calibrador. A frequência de calibração é de 30 dias (no máximo).

VALOR ATRIBUÍDO

A tabela a seguir contém os valores atribuídos ao calibrador de LDL:

Lot N° 25066 Validade: 2026-09-02

Analito:	Valor atribuído	Unidade
Colesterol LDL	122	mg/dL

VALORES ESPERADOS


O intervalo de referência para LDL no soro é o seguinte, de acordo com as diretrizes do Painel sobre Tratamento de Adultos III (ATP III) do Programa Nacional de Educação para o Colesterol (NCEP) dos Estados Unidos.

Colesterol LDL – Objetivo Principal do Tratamento

< 100	mg/dL	Ideal
100-129	mg/dL	Próximo do ideal/acima do ideal
130-159	mg/dL	Limítrofe
160-189	mg/dL	Elevado
> 190	mg/dL	Muito elevado



Medica Corporation, 5 Oak Park Drive
Bedford, MA 01730-1413 USA

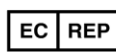

Emergo Europe, Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague, The Netherlands