

REF 10655 6 X 1,0 mL'lik ŞİŞELER

KİMYASAL LDL KALİBRATÖRÜ

Düşük dansiteli lipoprotein dahil çeşitli lipoprotein sınıflarından lipoproteinler içeren her biri 1,0 mL liyofilize insan serumu içeren şişeler.

Not: LDL kolesterol değeri, Kolesterol için Ulusal Referans Sistemi'nde izlenebilirdir (NRS/CHOL).

KULLANIM AMACI

Medica EasyRA Kimya Analizörü'nde Medica LDL kolesterol testine yönelik LDL kalibratörü olarak kullanım içindir.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ VE UYARILAR

Bu ürünün elde edildiği insan kaynak materyali, tek donör ünite esasında test edilmiştir ve HBsAg, anti-HIV 1/2, anti-HCV ve HIV-1 Ag ile reaksiyon vermediği tespit edilmiştir.

Ancak, hiçbir yöntem enfeksiyon ajanlarının yokluğunu tam olarak garanti edemediği için, bu materyal ve tüm hasta örnekleri işlenmeli ve enfeksiyon hastalıklarını bulaştırmıyormuş gibi yok edilmelidir.

İŞLEME, SAKLAMA VE STABİLİTE TALİMATLARI

Kuru kalibratör, 2°-8°C'de saklanması halinde etiket üzerindeki son kullanma tarihine kadar stabildir. **SON KULLANMA TARİHİ GEÇEN ÜRÜNÜ KULLANMAYIN.** Sulandırma sonrası kalibratörü 2°-8°C'de kapalı halde saklayın. Sulandırılmış olan kalibratör 2°-8°C'de 14 gün boyunca stabildir. Sulandırılmış kalibratörün stabilitesi, eş hacimlerde bölünmesi ve -80°'den daha düşük bir ısıda dondurulması ile uzatılabilir. Eş hacimlere bölünmüş olan donmuş LDL kalibratörü -80°C'de 4 haftaya kadar stabildir.

MİKROBİYOLOJİK KONTAMİNASYONUN VEYA BULANIKLIĞIN SÖZ KONUSU OLDUĞU ŞİŞEYİ ATIN.

KULLANIM TALİMATLARI

1. Sulandırmadan önce, şişenin ortam sıcaklığına gelmesine izin verin.
2. Her bir liyofilize serum şişesini, ortam sıcaklığına getirilmiş tam olarak 1,0 mL ölçüsünde olan reaktif saflığındaki su ile dikkatli bir şekilde sulandırın.
3. Şişeyi kapatın ve 20 dakika süresince bu şekilde kalmasına izin verin. Döndürerek veya ters çevirerek yavaşça karıştırın. **Çalkalamayın.**
4. Kalibratör, EasyRA operatör kılavuzunda ve kalibratör kullanım yönergelerindeki talimatlara göre hasta örneklerinden önce çalışılmalıdır. Kalibrasyon frekansı 30 gündür (maksimum).

DEĞER ATAMA

Aşağıdaki tablo, LDL Kalibratörü için atanan değerleri içermektedir.

Lot No. 25066 Son Kullanma Tarihi: 2026-09-02

Analit:	Atanan Değer	Birimler
LDL Kolesterol	122	mg/dL

BEKLENEN DEĞERLER


Serumdaki LDL için referans aralığı, Ulusal Kolesterol Eğitim Programı (NCEP) Erişkin Tedavi Paneli III (ATP III) yönergelerine göre aşağıdaki gibidir.

LDL Kolesterol – Başlıca Tedavi Hedefi

< 100	mg/dL	Optimum
100-129	mg/dL	Optimuma yakın/optimumun üzerinde
130-159	mg/dL	Sınırdaki yüksek
160-189	mg/dL	Yüksek
> 190	mg/dL	Çok yüksek



Medica Corporation, 5 Oak Park Drive
Bedford, MA 01730-1413 USA

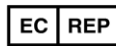

Emergo Europe, Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague, The Netherlands