

REF 10657 LIVELLO CAL 1, 3 FLACONI da 1 ml
LIVELLO CAL 2, 3 FLACONI da 1 ml

MULTICALIBRATORE CHIMICO PER TIBC

Ciascuna fiala contiene preparazioni liofilizzate con additivi e stabilizzanti non reattivi a due diversi livelli, basso e alto, di TIBC basata sul materiale umano da cui deriva.

USO PREVISTO

Il set multi-calibratore per capacità ferro-legante totale ("TIBC") è progettato per essere utilizzato nella calibrazione dell'analisi TIBC Medica sull' analizzatore chimico clinico EasyRA®. Solo per uso diagnostico *in vitro*. Solo per uso professionale.

PRECAUZIONI E AVVERTENZE PER LA SICUREZZA

1. Nella manipolazione dei reagenti di laboratorio è necessario adottare le normali precauzioni.
2. Il materiale umano da cui deriva questo prodotto è stato testato ed è stato riscontrato non reattivo ad HBsAg, anti-HIV 1/2, anti-HCV e HIV-1Ag. Tuttavia, poiché nessun metodo è in grado di garantire completamente l'assenza di agenti infettivi, questo materiale e tutti i campioni dei pazienti devono essere manipolati e smaltiti come potenziali veicoli di malattie infettive. Fare riferimento al Manuale del National Institute of Health "Biosafety in Microbiology and Biomedical Laboratories", • 2ª ed., 1988.
3. Non pipettare usando la bocca. Evitare l'ingestione e il contatto con la pelle.
4. I calibratori di questo kit contengono azoturo di sodio come conservante. L'azoturo di sodio può formare composti esplosivi se le tubature di scarico sono in metallo. Se si smaltiscono i materiali attraverso gli impianti idraulici, fare scorrere un'abbondante quantità di acqua.

ISTRUZIONI PER IL TRATTAMENTO, LA CONSERVAZIONE E LA STABILITÀ

Prima della ricostituzione, i calibratori si mantengono stabili fino alla data di scadenza riportata sull'etichetta se conservati ben chiusi ad una temperatura di 2-8 °C. I calibratori aperti sono stabili per 10 giorni a 2 – 8 °C.

ISTRUZIONI PER L'USO

1. Prima di ricostituire il calibratore, attendere che le fiale si riscaldino fino a temperatura ambiente.
2. Ricostituire con attenzione ogni fiala di siero liofilizzato con esattamente 1,0 ml di acqua di grado reagente a temperatura ambiente.
3. Chiudere la fiala e lasciarla riposare per 30 minuti. Mescolare roteando o invertendo delicatamente la fiala. Verificare che sia avvenuta la completa dissoluzione del materiale. **Non agitare.**

ASSEGNAZIONE VALORI


Nella tabella di seguito sono indicati i valori assegnati per i calibratori per TIBC:

N° lotto: 24233 Scadenza: 2025-11-30

Analita:	Valore assegnato	Unità
TIBC EasyCal, Livello 1	107	µg/dl
TIBC EasyCal, Livello 2	729	µg/dl



Medica Corporation, 5 Oak Park Drive
Bedford, MA 01730-1413 USA

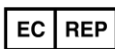

Emergo Europe, Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague, The Netherlands