

REF 10659 6 FLASCHEN JE 1 ml

C-REAKTIVES PROTEIN (CRP) KALIBRATORSET

Fläschchen mit jeweils 1 ml flüssig-stabilem Kalibrator mit verschiedenen Stufen von CRP auf Grundlage menschlichen Ausgangsmaterials. Dieser Multikalibratorsatz wurde für die Medica Corporation hergestellt.

VERWENDUNGSZWECK

Dieses CRP-Kalibratorset ist zur Kalibrierung des Medica-CRP-Tests auf dem EasyRA® Clinical Chemistry-Analysator vorgesehen, wenn dieser in Verbindung mit einem EasyRA CRP-Reagens verwendet wird. Die CRP-Kalibratoren werden verwendet, um Referenzpunkte festzulegen, die bei der Bestimmung der Messwerte des CRP in menschlichem Serum und Plasma benutzt werden. Für die *In-vitro*-Diagnostik vorgesehen. Nur für den professionellen Einsatz bestimmt.

SICHERHEITSVORKEHRUNGEN UND WARNUNGEN

Das menschliche Quellmaterial, aus dem dieses Produkt gewonnen wurde, wurde getestet und im Hinblick auf HBsAg, Anti-HIV 1 / 2, Anti-HCV und HIV-1Ag als nicht reaktiv befunden.

Da jedoch keine Methode mit hundertprozentiger Sicherheit gewährleisten kann, dass keine Infektionserreger vorhanden sind, sollten dieses Material und alle Patientenproben so behandelt und entsorgt werden, als bestünde die Gefahr der Übertragung von Infektionskrankheiten.

HANDHABUNG, LAGERUNG UND BESTÄNDIGKEIT

Die Kalibratoren sind bis zum Verfallsdatum stabil, wenn sie ungeöffnet bei einer Temperatur von 2 – 8 °C gelagert werden.

Nachdem die Kalibratoren geöffnet wurden, müssen sie bei 2 – 8 °C gelagert werden. Die geöffneten Kalibratoren sind bei 2 – 8 °C stabil.

GEBRAUCHSANWEISUNG

1. Warten Sie 20 Minuten, bevor Sie das Fläschchen öffnen, damit es die Umgebungstemperatur erreicht.
2. Vorsichtig durch leichtes Kippen oder Schwenken vermischen. **Nicht schütteln!**
3. Der Test der C-reaktiven Multikalibratoren erfolgt auf dieselbe Art und Weise wie der der Patiententestproben beim Testdurchlauf. Auf dem Beipackzettel finden Sie Informationen zum Medica C-reaktiven Proteinreagens.

WERTZUWEISUNG

Die Werte werden der CRP-Kalibratorreihe mithilfe einer Latex-verstärkten Immunturbimetrie-Methode zugewiesen. Dabei wird das Material gemäß einer angemessenen internationalen Referenzpräparation (ERM-DA472) standardisiert.

Die untere Tabelle enthält die zugewiesenen Werte für den CRP-Kalibrator:
Die genauen Kalibratorwerte finden Sie auf der Fläschchen-Packung jeder Charge.

Chargenr. 25211 Verfallsdatum: 2026-09-28

Analyt:


Zugewiesene Wert-

Kalibratorwerte für EasyRA

	mg/L
EasyCal CRP Stufe 1	0,0
EasyCal CRP Stufe 2	2,5
EasyCal CRP Stufe 3	10,0
EasyCal CRP Stufe 4	20,0
EasyCal CRP Stufe 5	80,0
EasyCal CRP Stufe 6	160,0



Medica Corporation, 5 Oak Park Drive
Bedford, MA 01730-1413 USA

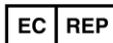

Emergo Europe, Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague, The Netherlands