

REF 10659 ФЛАКОНЫ 6 X 1 мл

НАБОР КАЛИБРАТОРОВ ДЛЯ РЕАКТИВНОГО С-ПРОТЕИНА (CRP)

Каждый из флаконов содержит 1 мл стабильного жидкого калибратора с различными уровнями CRP, изготовленного на основе исходного человеческого материала. Данный набор калибраторов был изготовлен для компании Medica Corporation.

НАЗНАЧЕНИЕ

Этот Набор калибраторов для CRP предназначен для калибровки анализа Medica на CRP на клиническом биохимическом анализаторе EasyRA® при использовании в сочетании с реагентом CRP EasyRA. Калибраторы для CRP используются для установления контрольных точек, используемых при определении значений при измерениях уровня CRP в человеческой сыворотке и плазме. Для диагностического применения *in vitro*. Только для профессионального применения.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Исходный человеческий материал, из которого был получен данный продукт, был протестирован у каждого отдельного донора и оказался отрицательным по HBsAg, anti-HIV 1/2, anti-HCV и HIV-1 Ag.

Тем не менее ни один из методов не может гарантировать полного отсутствия возбудителей инфекций, поэтому данный материал и все пробы от пациентов следует обрабатывать и утилизировать по правилам обращения с инфекционно опасным материалом.

ИНСТРУКЦИИ ПО ОБРАЩЕНИЮ, ХРАНЕНИЮ И ОБЕСПЕЧЕНИЮ СТАБИЛЬНОСТИ

При температуре хранения 2—8° С и хранении в закрытом состоянии калибраторы стабильны до истечения срока годности, указанного на этикетке.

После открытия калибраторов храните их при температуре 2—8° С. Открытые калибраторы стабильны на протяжении 3 месяцев при температуре 2—8° С.

ИНСТРУКЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

1. Перед открытием флакона с калибратором прогрейте флакон при комнатной температуре в течение 20 минут.
2. Перемешайте легкими вращательными движениями или переворачиванием. **Не встряхивайте пробирку.**
3. Измерение калибраторов реактивного С-протеина производится с помощью той же самой процедуры, что и тестовых проб пациента во время диагностической процедуры. См. листок-вкладыш для реагента реактивного С-протеина Medica.

АТТЕСТОВАННЫЕ ЗНАЧЕНИЯ

Значения присваиваются серии калибраторов для CRP с использованием иммунотурбидиметрического метода с латексным усилением в сравнении с материалом, стандартизированным по соответствующему международному эталонному препарату (ERM-DA472).

В Таблице ниже содержатся присвоенные значения для калибратора CRP:
См. точные значения калибратора на этикетках флаконов для каждой партии.

Партия № 25211

Годен до: 2026-09-28

Анализируемое вещество:


Аттестованное значение

Значения калибратора для EasyRA

	мг/л
EasyCal CRP Уровень 1	0,0
EasyCal CRP Уровень 2	2,5
EasyCal CRP Уровень 3	10,0
EasyCal CRP Уровень 4	20,0
EasyCal CRP Уровень 5	80,0
EasyCal CRP Уровень 6	160,0



Medica Corporation, 5 Oak Park Drive
Bedford, MA 01730-1413 USA

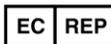

Emergo Europe, Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague, The Netherlands