

# MEDICA EASYCAL 校准品

REF 10653

6 X 1.0mL 瓶装

## 高密度脂蛋白 (HDL) 胆固醇化学校准品

西林瓶, 每瓶含冻干人血清 1.0mL, 人血清含各种类别的脂蛋白 (包括高密度脂蛋白)。

注: 高密度脂蛋白 (HDL) 胆固醇的值可追溯至美国疾病控制中心 (CDC) 的 HDL 参考方法。

### 预期用途

用作 Medica EasyRA 化学分析仪进行 Medica HDL 胆固醇试验的 HDL 校准品。

### 安全措施和警告

对制备本品的人源材料, 已就每个供体单位进行逐一测试, 确定没有 HBsAg、抗-HIV 1 / 2、抗-HCV 和 HIV-1 Ag 的反应。但由于没有一种方法能完全保证不存在感染因子, 处理本材料和所有患者样本时, 应把他们视作能传播感染性疾病的材料和样本。

### 关于搬运、贮藏和稳定性的说明

未打开的校准品如于 2-8°C 下贮藏, 在标签上列出的有效期限内是稳定的。

重配制后, 校准品应在 2-8°C 下密封贮藏。重配制的校准品在 2-8°C 下能稳定 14 日。重配制校准品经等分分装并在低于 -70°C 的温度下冷冻, 可延长其稳定期。冷冻 HDL 校准品的等分试样在 -70°C 下稳定达 4 周。

### 使用说明

1. 重配制之前, 让西林瓶预热至环境温度。
2. 用准确量取的环境温度下试剂级纯水 1.0mL, 仔细重配制每瓶冻干血清。
3. 密封西林瓶并静置 20 分钟。轻旋或倒置令其混匀。**不要摇晃。**

### 赋值


下表包含给 HDL 校准品所赋的值:

批号: 26043 失效期: 2027-12-01

分析物:	所赋值	单位
HDL Chol (高密度脂蛋白胆固醇)	58	mg/dL



Medica Corporation, 5 Oak Park Drive  
Bedford, MA 01730-1413 USA

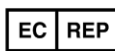

Emergo Europe, Prinsessegracht 20  
2514 AP The Hague, The Netherlands