

REF 10659 6 FLACONI DA 1 ml

KIT DI CALIBRAZIONE PER PROTEINA C-REATTIVA (CRP)

Fiale contenenti ciascuna 1 ml di calibratore liquido stabile con diversi livelli di proteina C reattiva, con preparazione basata su materiali di origine umana. Questo set multi-calibratore è stato prodotto per Medica Corporation.

USO PREVISTO

Questo kit di calibrazione per proteina C reattiva è destinato all'uso per la calibrazione dell'analisi Medica della CRP sull'analizzatore chimico clinico EasyRA® se utilizzato congiuntamente al reagente per proteina C reattiva EasyRA. I calibratori per proteina C reattiva sono utilizzati per stabilire punti di riferimento impiegati nella determinazione di valori nella misurazione della CRP nel siero e nel plasma umani. Per uso diagnostico *in vitro*. Solo per uso professionale.

PRECAUZIONI E AVVERTENZE PER LA SICUREZZA

Il materiale di origine umana da cui questo prodotto è derivato è stato analizzato ed è risultato non reattivo ad HBsAg, anticorpi anti-HIV 1 / 2, anticorpi anti-HCV e HIV-1 Ag.

Tuttavia, poiché nessun metodo è in grado di garantire completamente l'assenza di agenti infettivi, questo materiale e tutti i campioni dei pazienti devono essere manipolati e smaltiti come potenziali veicoli di malattie infettive.

ISTRUZIONI PER LA MANIPOLAZIONE, LA CONSERVAZIONE E LA STABILITÀ

I calibratori si mantengono stabili fino alla data di scadenza riportata sull'etichetta se conservati in confezione chiusa a una temperatura di 2-8 °C.

Dopo l'apertura, conservare i calibratori a una temperatura di 2-8°C. I calibratori aperti sono stabili per 3 mesi a 2-8°C.

ISTRUZIONI PER L'USO

1. Prima di aprire la fiala del calibratore, attendere che si riscaldi fino a temperatura ambiente per 20 minuti.
2. Mescolare roteando o invertendo delicatamente la fiala. Non agitare.
3. I multicalibratori per proteina C reattiva vengono analizzati utilizzando la stessa procedura seguita per i campioni di test dei pazienti nella procedura di test. Vedere l'insero informativo per il reagente per proteina C reattiva Medica.

ASSEGNAZIONE VALORI

I valori vengono assegnati alla serie di calibratori per proteina C reattiva con un metodo immunoturbidimetrico potenziato da lattice, con riferimento a materiale standardizzato in base a una preparazione internazionale di riferimento appropriata (ERM-DA472).

Nella tabella di seguito sono indicati i valori assegnati per il calibratore per proteina C reattiva. Per i valori esatti del calibratore, fare riferimento all'etichetta della fiala per ciascun lotto.


N. lotto: 26091 Scadenza: 2027-02-28

Analita:**Valore assegnato****Valori dei calibratori per EasyRA**

	mg/l
EasyCal CRP, Livello 1	0,0
EasyCal CRP, Livello 2	2,5
EasyCal CRP, Livello 3	10,0
EasyCal CRP, Livello 4	20,0
EasyCal CRP, Livello 5	80,0
EasyCal CRP, Livello 6	160,0



Medica Corporation, 5 Oak Park Drive
Bedford, MA 01730-1413 USA

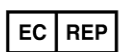

Emergo Europe, Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague, The Netherlands