

MEDICA CALBRATORE PER CREATININA URINARIA

REF 10652 1 FLACONE DA 10 ml

CALBRATORE PER CREATININA URINARIA

Fiale contenenti ciascuna 10 ml di creatinina in 0,10N di acido cloridrico.

USO PREVISTO

Da usare come calibratore nel test della creatinina urinaria sull'analizzatore chimico Medica EasyRA.

AVVERTENZE E PRECAUZIONI DI SICUREZZA

Seguire buone prassi di laboratorio.

ISTRUZIONI PER IL TRATTAMENTO, LA CONSERVAZIONE E LA STABILITÀ

Il calibratore liquido si mantiene stabile fino alla data di scadenza se conservato ad una temperatura di 2-8° C.

Dopo l'apertura, il calibratore deve essere conservato chiuso a 2-8° C.

ISTRUZIONI PER L'USO

Pronto all'uso.

ASSEGNAZIONE VALORI


Nella tabella seguente sono indicati i valori assegnati al calibratore per la creatinina urinaria:

N° lotto: 25234 Scadenza: 2026-08-22

Analita:	Valore assegnato	Unità
Creatinina	149,31	mg/dl



Medica Corporation, 5 Oak Park Drive
Bedford, MA 01730-1413 USA

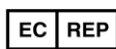

Emergo Europe, Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague, The Netherlands